



Tokuyama

Creation with a heart



**ESTELITE
SIGMA**



ESTELITE LV
HIGHflow
MEDIUMflow
LOWflow



Estelite SIGMA

Die Perle unter den Composites

Herausragende Polierbarkeit

Kugelrunde Füllstoffe mit relativ gleichmäßigem Durchmesser (0,2µm) gewährleisten eine dem Zahnschmelz ähnliche Glätte. Somit sind eine ausgezeichnete Polierbarkeit und einzigartige Ästhetik garantiert.



Einzigartiger Chamäleon-Effekt

Vita	Hell																Dunkel			
	Inc	B1	A1	B2	D2	A2	C1	C2	D4	A3	D3	B3	A 3,5	B4	C3	A4	C4			
Estelite																				
A1			●																	
A2						●														
A3										●										
A3,5													●							

Farbanpassungsbereich von **ESTELITE**.

Geringe Schrumpfung

ESTELITE besteht seit mehr als 15 Jahren den Praxistest in Japan. Es hält jedem wissenschaftlichen Vergleich Stand und besitzt ein hervorragendes Randspaltverhalten.

Anhaltende Farbtreue

So anpassungsfähig **ESTELITE** auf der einen Seite ist, so unveränderlich ist es auf der anderen. Denn nach der Polymerisation ändert sich die Farbe nur minimal. Darauf können Sie sich verlassen.



Geringste Abrasion

ESTELITE zeichnet sich durch eine äußerst geringe Abrasion aus (Studie Prof. de Gee, ACTA Universität, Amsterdam).

Die optimale Vorbereitung

ONE-UP BOND F plus

Das selbststärkende
Einschritt-Adhäsiv mit
visueller Unterstützung.
Die perfekte Ergän-
zung zu **ESTELITE**.



Die universelle Paste Ästhetik wie in der Natur


Zugegeben, wir haben ein bisschen abgeguckt: von der Natur. So entstand mit **ESTELITE SIGMA** ein ästhetisches und lichthärtendes Komposit, das von seinem natürlichen Vorbild kaum zu unterscheiden ist.

Jeder Mensch ist einzigartig. So wie seine Zähne und deren Farbe.

ESTELITE SIGMA trifft immer den richtigen Ton, ist einfach in der Handhabung und sehr gut polierbar.

Denn dank seiner intelligenten Formel passt sich das Komposit fast jeder Farbe optimal an. Sie benötigen lediglich vier Grundfarben, die nahezu das gesamte Spektrum abdecken. Mit der neuen Struktur ist **ESTELITE SIGMA** auch uneingeschränkt für den molaren Bereich geeignet.

Kleiner Aufwand – große Wirkung: **ESTELITE SIGMA**. So individuell wie Ihre Patienten.

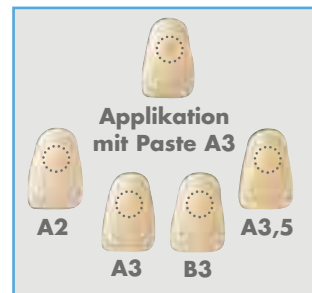

Die Fließfähigen Immer der richtige Ton

Mit diesem Produkt bieten wir Ihnen eine Innovation, die alle für Sie wichtigen Kriterien auf einen Nenner bringt: Einfache Anwendung durch das Direct Syringe Delivery System und drei Fließfähigkeiten für die unterschiedlichsten Situationen.

Dank seiner hohen Fließfähigkeit sind selbst schwierige Kavitäten einfach zu füllen. **ESTELITE LV High Flow** fließt ohne Hilfsmittel in und auf präparierte Zähne. Besonders geeignet zur Füllungsversorgung von kleinen Kavitäten, Beschichtung von Zähnen, Fissurenversiegelung und Wurzelerosion. **ESTELITE LV Medium Flow** ist das fließfähige Komposit

mittlerer Viskosität. Es entspricht im Grunde den bisher bekannten Fließ- und Viskositätseigenschaften.

ESTELITE LV Low Flow fließt unter Druck, hält aber die Form bis zur Polymerisation, wenn kein Druck ausgeübt wird. Besonders geeignet zur Füllungsversorgung von Kavitäten der Klasse V, kleinen Kavitäten der Klassen I, II, III sowie zur Unterfüllung.



3 Viskositäten der fließfähigen Komposit für die gesamte Bandbreite Ihrer Bedürfnisse

ESTELITE SIGMA



ESTELITE SIGMA Drehspritze à 3,8 g

Erhältlich in den Vita-Farben: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, OA1, OA2, OA3, OB3, Inzisal, Zervikal und Bleaching.



ESTELITE SIGMA Dosierkapeln à 0,2g

Erhältlich in den Vita-Farben: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, OA1, OA2, OA3, OB3, Inzisal, Zervikal und Bleaching.

ESTELITE LV HIGHflow MEDIUMflow LOWflow



ESTELITE LV Einzelspritze à 3 g inklusive 20 Applikationstips

Erhältlich in den Vita-Farben: A1, A2, A3
 Mediumflow auch A3.5

INTRO-KIT



Drehspritzen Intro-Kit 6 x 3,8 g ESTELITE SIGMA (6 Vita-Farben) 2 x 2 ml ONE-UP Bond F plus (MiniKit) 1 Farbfächer mit 18 Farbschlüsseln

Dosierkapseln Intro-Kit 40 x 0,2g ESTELITE SIGMA (5 x 8 Vita-Farben) 2 x 2 ml ONE-UP Bond F plus (MiniKit) 1 Farbfächer mit 18 Farbschlüsseln